

01. Przewodnik BOOSTER PRO

Ponowne objęcie przywództwa dzięki zupełnie nowemu 6 w 1 BOOSTER PRO

Rewolucyjne urządzenie oferujące widoczne rezultaty w zakresie blasku, objętości, elastyczności, porów i wibracji dźwiękowych. Wszystkie te aspekty pielęgnacji można osiągnąć za pomocą jednego urządzenia BOOSTER PRO.



Przegląd trybu głównego

Tryb Booster

BOOSTER MODE

Nałóż odpowiednią ilość produktu do pielęgnacji skóry i przyłóż głowicę do skóry. Delikatnie roluj okrężnymi ruchami, aby umożliwić wchłonięcie produktu.

Zalecana częstotliwość 1-3 razy dziennie (5-10 minut na sesję)

Tryb MC

MC MODE

Nałożyć odpowiednią ilość produktu do pielęgnacji skóry i przyłożyć głowicę do skóry. Używaj, przesuwając się od środka twarzy na zewnątrz, trzymając głowicę przymocowaną. Zalecana częstotliwość 1-3 razy dziennie (5-10 minut na sesję)

Elastyczność Tryb Derma Shot

DERMA SHOT MODE

Nałożyć odpowiednią ilość produktu do pielęgnacji skóry i powoli przesuwaj po skórze. Zatrzymaj się na 2 sekundy w punktach mięśni, aby je rozluźnić.

Zalecana częstotliwość 1-3 razy dziennie (5-10 minut na sesję)

Pory Tryb Air Shot

AIR SHOT MODE

Po oczyszczeniu i osuszeniu skóry delikatnie przesun krawędź głowicy po twarzy.

Zalecana częstotliwość 2-3 razy w tygodniu (5 minut na sesję)

02. Sygnalizacja LED



NIEBIESKI



POMARAŃCZOWY



ZIELONY



CZERWONY



FIOLETOWY

Tryb Radiance Booster

Wibracje mają na celu pomóc w głębokim wchłonięciu produktu do pielęgnacji skóry.



Tryb linii MC

Wibracje są zsynchronizowane z ruchem podnoszenia




Elastyczność Tryb Derma Shot

Wibracje są odpowiednie do pielęgnacji mięśni.



Pory Tryb Air Shot

Wibracje są przeznaczone do kompleksowej pielęgnacji porów.

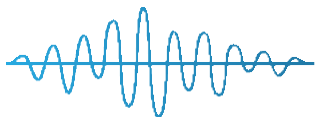

Czujnik kontaktu ze skórą



Inteligentny i bezpieczny kontakt ze skórą Funkcja czujnika


Wyposażony w zaawansowany czujnik kontaktu ze skórą, który oświetla światło LED tylko wtedy, gdy jest w kontakcie ze skórą, rejestrując czas kontaktu jako czas zabiegu.

03. Połączenie Bluetooth

Pełna kontrola dzięki AGE-R

Od ustawienia preferowanego trybu, intensywności, głośności, wibracji i kolorów diod LED po rejestrowanie każdego aspektu pielęgnacji skóry za pomocą automatycznych raportów. Używaj go bez wysiłku i swoją transformację.

Przegląd funkcji Bluetooth

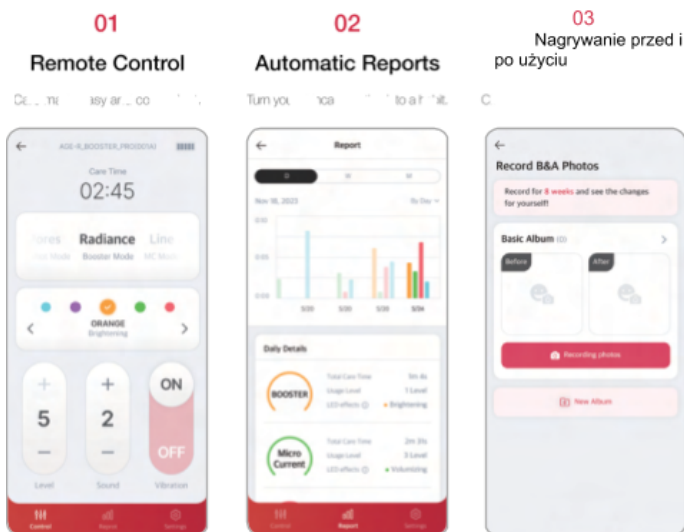

The default volume setting is at level 3, and setting it to 0 (mute) will mute all sounds effects




Wykorzystaj w pełni możliwości BOOSTER PRO

Pobierz aplikację AGE R za darmo już teraz i doświadczyć AGE-R BOOSTER PRO w bardziej profesjonalny i wygodny sposób.

Wskanuj kod QR lub wyszukaj 'AGE R' w sklepie z aplikacjami.


01

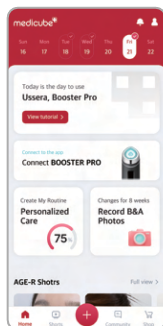


02



03

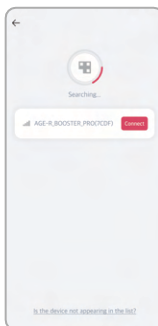

04

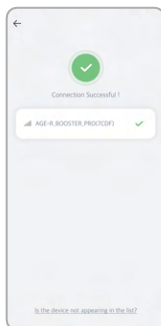

1. Uzyskaj dostęp do aplikacji AGE-R i kliknij "Connect BOOSTER PRO".
2. Włącz Bluetooth w smartfonie i włącz BOOSTER .
3. Po potwierdzeniu wykrycia urządzenia kliknij ikonę "Połącz".
4. Sprawdź, czy ekran "Połączenie powiodło się" i dźwięk połączenia Bluetooth z BOOSTER PRO są wyświetlane prawidłowo.

04. Tryb Booster

Tryb Booster, który Pomaga zwiększyć blask

BOOSTER MODE

Ustawienie domyślne | Pomarańczowa dioda LED

Może być stosowany z różnymi rodzajami produktów do pielęgnacji skóry i maseczek do twarzy. Wybierz najbardziej odpowiednią metodę spośród trzech poniższych metod dotykania i używaj zgodnie z nią.



Jak używać



Nawadnianie

Przyłóż głowicę do skóry i obracaj ją okrężnymi ruchami, zapewniając efekt wzmocnienia.



Wzmocnienie

Naskiskaj i przesuwaj głowicę po skórze, jakby się ślizgała, zapewniając wzmocnienie



Koncentracja

Przyłóż głowicę do skóry i przyciskaj ją w jednym miejscu przez 1-2 sekundy, a następnie przejdź do kolejnego miejsca.

Środki ostrożności przed użyciem



Zabronione obszary
użytkowania



Zalecane obszary
dla niskiego poziomu
użytkowania



Częstotliwość korzystania
z trybu Booster,
maksymalnie 1-3
razy dziennie



KROK 01



KROK 02

Krok 1 - po oczyszczeniu twarzy nałóż odpowiednią ilość produktu do skóry

Krok 2 - upewnij się, że głowica jest w pełnym kontakcie z powierzchnią twojej skóry, następnie delikatnie wmasuj produkt



KROK 03



KROK 04

Krok 3 - użyj trybu Booster, kontynuuj aż produkt w pełni się wchłonie, 1-3 razy dziennie, 5-10 minut

Krok 4 - kiedy produkt do skóry całkowicie się wchłonie, skup się na wybranych przez Ciebie obszarach skóry

05. Tryb MC

Tryb MC dla linii

Pielęgnacja zwiększająca objętość




MC MODE

Ustawienie domyślne | Zielona dioda LED

Stosować po nałożeniu produktu do pielęgnacji skóry.

Jeśli stymulacja jest zbyt słaba, należy zmniejszyć ilość produktu do pielęgnacji skóry.

Jak używać

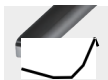

PODSZEWKA

Przyłóż głowicę do skóry i wykonuj nią ruchy w górę.

Wzmocnienie efektów trybu MC

Zacznij od trybu MC, aby zwiększyć objętość drobnych i głębszych zmarszczek. Następnie przejdź do trybu Derma Shot, aby masować mięśnie w celu uzyskania bardziej elastycznej i odmłodzonej skóry.

MC MODE



DERMA SHOT MODE

Zaleca się stosowanie w następującej kolejności



Zabronione obszary
użytkowania



Zalecane obszary dla
niskiego poziomu
użytkowania



Częstotliwość
korzystania z trybu MC,
1-3 razy dziennie



KROK 01

Po oczyszczeniu skóry nałożyć odpowiednią ilość z powierzchni skóry.



KROK 02

Upewnić się, że głowica całkowicie styka się z powierzchnią skóry, a następnie przesunąć głowicę od środka twarzy na zewnątrz ruchem do góry.



KROK 03

W przypadku szyi i czoła należy użyć ponownie rozprowadzony od dołu do góry. ukierunkowanym



KROK 04

Gdy produkt do pielęgnacji skóry zostanie w większości wchłonięty, zakończyć na pożądanym obszarach.

06. Tryb Derma Shot

Tryb Derma Shot do pielęgnacji elastyczności

DERMA SHOT MODE

Ustawienie domyślne | Czerwona dioda LED

Po nałożeniu produktu do pielęgnacji skóry należy masować obszar, w którym stymulacja mięśni działa najlepiej. Podczas stosowania można bezpośrednio obserwować ruch mięśni.



Jak używać



Koncentracja

Powoli przesuwaj głowicę w pełnym kontakcie ze skórą. Zatrzymaj się na 1-2 w punktach, w których stymulacja mięśni działa najlepiej, aby rozluźnić mięśnie.

Wzmocnienie efektów trybu Derma Shot

Zacznij od trybu MC, aby zwiększyć objętość drobnych i głębszych zmarszczek, a następnie przejdź do trybu Derma Shot, aby stymulować mięśnie w celu uzyskania bardziej elastycznej i odmłodzonej skóry.

MC MODE



DERMA SHOT MODE

Zaleca się stosowanie w tej kolejności.

Środki ostrożności przed użyciem



Zabronione obszary
użytkowania



Zalecane obszary dla
niskiego poziomu
użytkowania



Częstotliwość
korzystania z
trybu Derma
Shot, 1-3 razy
dziennie



KROK 01

Po oczyszczeniu nałożyć odpowiednią odpowiednią ilość produktu pielęgnacyjnego na skórę. przed użyciem. stymulację,



KROK 02

z głowicą w pełnym kontakcie ze skórą, nanieść poruszać się powoli i zatrzymaj na 1-2 sekundy obszarach, w których odczuwasz największą

rozluźnienie mięśni.



KROK 03

Krok 3 - Masuj delikatnie od linii szyi w stronę obojczyka

Krok 4 - używaj 5-10 minut dziennie dla maksymalnego efektu elastyczności



KROK 04

07. Tryb strzału z powietrza

Tryb Air Shot do pielęgnacji porów

AIR SHOT MODE

Ustawienie domyślne | Niebieska dioda LED

Po oczyszczeniu należy używać go na suchej skórze, lekko omiatając ją krawędzią głowicy. Nie będzie prawidłowo przenosić stymulacji, gdy będzie używana na mokrej skórze.



Jak używać



ODKURZANIE

Delikatnie zetknąć się ze skórą za pomocą krawędzi głowicy i przejeżdżać w jednym kierunku.



Dla szerokich obszarów

W przypadku stosowania na dużych powierzchniach, przejeżdżać krawędzią.



Dla mniejszych obszarów

W przypadku miejscowych obszarów, takich jak nos, podbródek i między brwiami

Środki ostrożności przed użyciem



Zabronione
użytkowania



Zalecane obszary
dla niskiego poziomu

W przypadku wrażliwych obszarów, takich jak oczy, nos i okolice ust.



Tryb Air Shot Obszary

czułościowe

Zalecamy stosowanie razy dziennie, 2-3 razy tygodniu z przerwami 2-3 dni



KROK 01

Stosować na całkowicie suchą skórę po oczyszczeniu.

**Nie będzie działać jeśli skóra jest mokra.*



KROK 02

Delikatnie dotknij skóry krawędzią głowicy i przeciągnij ją w jednym kierunku



KROK 03



KROK 04

Krok 3 - dla obszarów takich jak nos, podbródek i pomiędzy brwiami, delikatnie przejeżdżając czubkiem głowicy

Krok 4 - po 5 minutach użycia, przejdź na tryb booster aby zaabsorbować produkt do skóry (np. krem lub serum) i uzyskać efekt promienności.